

TrollFoil. True Perfection.



TrollFoil

АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ФОЛЬГА

ПОЧЕМУ ВАЖНО ВЫБРАТЬ КАЧЕСТВЕННУЮ ФОЛЬГУ?

Окклюзионные нарушения, вызванные изменением морфологии зубов (например, при реставрациях или протезировании) могут привести к общим нарушениям стоматогнатологической системы – вызвать повышенную нагрузку на зубы, пародонт, мышцы и височно-нижнечелюстной сустав.

Поэтому один из важнейших завершающих этапов лечения – визуальный контроль окклюзии после установки новых пломб, коронок, мостовидных протезов и после ортодонтического лечения.

Точная диагностика окклюзии – залог успеха стоматолога, здоровья и комфорта пациентов!

Качественная артикуляционная фольга позволяет специалистам верно оценить контактные пункты и идеально провести финишную обработку поверхностей или подгонку конструкций, чтобы пациенту не пришлось приходить на повторный прием.

Артикуляционная фольга высокого качества поможет точно определить даже минимальные преждевременные контакты на разных типах поверхностей, а также в условиях ограниченного открытия рта.

С экономической точки зрения правильно выбранная артикуляционная фольга поможет сократить расходы, снизить время, проводимое пациентом в кресле и вероятность повторного приема для исправления ошибок.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ?

- Толщина фольги
- Прочность на разрыв
- Свойства красящего слоя и точность маркировки
- На каких поверхностях работает
- Удобство использования во время приема
- Гипоаллергенность и безопасность
- Экономичность

Шведская артикуляционная фольга TrollFoil отвечает самым высоким требованиям профессионалов в области стоматологии по всем перечисленным характеристикам.

TROLLFOIL – УНИКАЛЬНЫЙ ТОНКИЙ, НО ПРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

- **ТОЛЩИНА ФОЛЬГИ – 8 мкм**

Толщина фольги 8 микрон + двустороннее красящее покрытие. При прикусе между зубами остается расстояние в 8 микрон, красящее покрытие прокусывается.

Чем тоньше фольга, тем лучше, нужно свести расстояние между зубами в прикусе на минимум. Фольга TrollFoil изготовлена из **суперпрочного** и **тонкого** полиэстера. Оптимальная толщина фольги позволит определить даже микронные супраконтакты, что крайне важно при ортопедическом лечении, а также во время эстетических реставраций.

- **ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ – 20 Мпа**

Очень прочная по сравнению с артикуляционной бумагой и другой фольгой. Подходит для проверки как статической, так и динамической окклюзии. Фольга TrollFoil **не крошится** и **не разрывается** на мелкие кусочки, которые могут быть проглочены пациентом. Может многократно применяться для проверки окклюзии у одного пациента без разрывов и необходимости брать новый листок фольги.



TROLLFOIL – ЧЕТКОСТЬ И ТОЧНОСТЬ МАРКИРОВКИ



- УНИКАЛЬНЫЙ КРАСЯЩИЙ СЛОЙ

Фольга покрыта уникальным красящим пигментом красного или синего цвета. Благодаря специальному способу нанесения слой получается очень плотным. За счет этого фольгу можно многократно использовать для проверки контактов у одного пациента – отпечаток контактов будет всегда четким, как при первом использовании.

Четко выраженный цвет отражает место нагрузки прикуса. Благодаря используемым материалам фольга TrollFoil оставляет максимально точный оттиск без размытия. Вам будет отчетливо видно, где есть преждевременный контакт и нужно сделать пришлифовку – нет риска убрать больше, чем необходимо.

Красящий слой устойчив к влаге, что повышает комфорт и оперативность работы.

TROLLFOIL – ДЛЯ ВСЕХ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ



- **РАБОТАЕТ НА ВЛАЖНЫХ И СУХИХ ПОВЕРХНОСТЯХ**

Красящее покрытие фольги TrollFoil не растекается во влажной среде. Фольга TrollFoil оставляет одинаково четкий след на сухих и влажных поверхностях, что очень важно для оптимизации и облегчения работы. Вы можете быть уверены в четкости оттиска даже при наличии слюны.

- **РАБОТАЕТ НА КОМПОЗИТАХ, КЕРАМИКЕ, МЕТАЛЛЕ, ДЕНТИНЕ, АМАЛЬГАМЕ**

Возможность работы на любых поверхностях делает фольгу TrollFoil универсальным инструментом для специалистов разных областей стоматологии. Фольга также подходит для окклюзионного контроля прикусных шин. Фольга TrollFoil работает на имплантатах (например, при обточке абатмента).


TROLLFOIL – НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

- **СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ**

Каждый листок фольги TrollFoil защищен специальным тонким пластиковым слоем, который удаляется перед началом работы одним движением. Вы будете уверены, что красящее вещество останется только на зубах, а не руках или одежде (вашей или пациента).

- **УНИКАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ**

Также каждый листок фольги TrollFoil имеет держатель, что исключает необходимость использовать дополнительные инструменты. Держатель расположен с обеих сторон красящего слоя. Просто берете фольгу пальцами за держатель и она готова к работе. Держатель не липнет к перчаткам из-за влажности или статического электричества. Благодаря держателю нет риска оставить ненужный отпечаток или смазать оттиск, задев перчаткой или инструментом. Это не только комфорт, но и экономия – нет необходимости использовать и стерилизовать лишние инструменты.

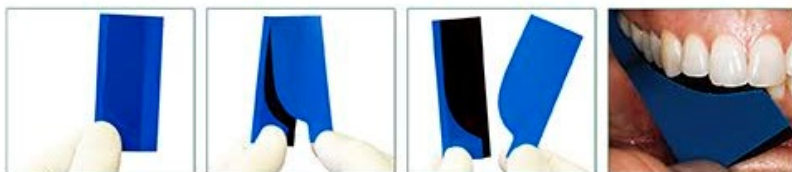

TROLLFOIL - ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ БЕЗ КОМПРОМИССОВ

- **СПЕЦИАЛЬНАЯ РАМКА**

Каждый листок фольги TrollFoil оснащён специальной рамкой, которая удерживает лист фольги в горизонтальной позиции. Благодаря такому каркасу фольга не перегибается и остается плоской во время контроля бокового движения. Фольга не будет скручиваться и загибаться. Это очень удобно, когда необходимо получить точный оттиск на половине челюсти.



TROLLFOIL – ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ПО-ШВЕДСКИ



- СДЕЛАНО В ШВЕЦИИ

Производитель фольги TrollFoil шведская компания TrollDental. TrollDental – это успешная международная компания с более чем 20-летним опытом работы и множеством уникальных патентов. Фольга TrollFoil известна на рынке уже более 20 лет и успешно используется специалистами более чем в 34 странах мира.

- СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

Весь производственный процесс проходит по стандартам ISO. Продукция произведена из экологически безопасных материалов, не содержит токсических веществ и абсолютно безопасна для использования.

TROLLFOIL – ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНОЕ КАЧЕСТВО

• СКОРОСТЬ РАБОТЫ И КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТА

Фольга TrollFoil – это отдельные листочки фольги, готовые к работе. Вам и вашему ассистенту не нужно заранее нарезать фольгу. Благодаря своим качествам фольга позволит вам определить контакты максимально четко, верно и быстро. Вам не придется многократно просить пациента «прикусить бумажку» и по несколько раз пришлифовывать одну и ту же область. Используя фольгу TrollFoil вы снижаете до минимума риск повторного визита пациента для исправления работы.

• ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА

Все владельцы клиник давно считают не только деньги, но и время. Сколько времени занимает один прием? А сколько из этого приема вы занимаетесь финишной доработкой реставраций? Можно ли использовать это время эффективнее? Сколько стоит многократная стерилизация лишних инструментов? Сколько стоит «бесплатный» повторный прием для исправления ошибок?

Ответив на все эти вопросы, вы поймете, что качественная артикуляционная фольга – это важный инструмент для эффективной работы на котором не стоит экономить! TrollFoil – выбор современных специалистов!

TROLLFOIL АССОРТИМЕНТ

• АССОРТИМЕНТ

Фольга TrollFoil выпускается в нескольких вариантах для удобства работы при любых клинических ситуациях:

- TrollFoil Blue | TrollFoil Red – в упаковке по 100 или 500 шт.
- TrollFoil Mini Blue (для одного зуба) - в упаковке по 100 или 500 шт.
- RollFoil Blue | RollFoil Red – 1 рулон (12 м.)



TrollFoil Mini Blue



TrollFoil Blue



TrollFoil Blue 5*100 шт